




הוראות שימוש במזרק אפיפן אוטומטי

מזרק אפיפן: זהו מזרק אוטומטי המכיל אדרנלין, היעיל לטיפול במקרים של תגובה אלרגית קשה שעלולה לסכן חיים
קרא בעיון את דף ההסבר והוראות השימוש המצורפות למזרק כך שבמצב חירום תדעו איך להשתמש במזרק.

הוראות שימוש:

1. פתח את מכסה נרתיק הפלסטיק והוצא את המזרק על ידי הטיית הנרתיק.
2. אחוז את המזרק כאשר הקצה הכתום מופנה כלפי מטה, בעזרת היד השנייה משוך את מכסה הביטחון הכחול (ראה איור)

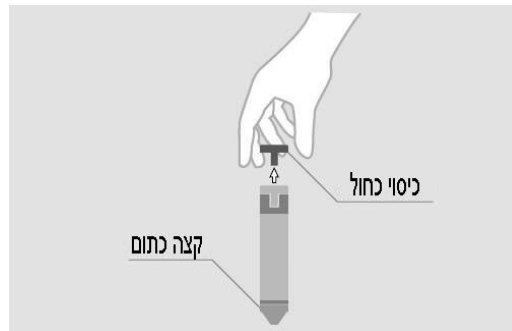

3. אחוז במזרק כאשר הקצה הכתום נמצא בסמוך לירך החיצונית, תוך כדי תנופה הצמד בחוזקה את המזרק לירך החיצונית עד להשמעת "קליק" כאשר המזרק בזזית 90 מעלות לירך (ראה איור)



4. החזק את המזרק יציב וצמוד לירך במשך 10 שניות עד לסיום ההזרקה (כאשר ההזרקה הסתיימה, החלון השקוף במזרק יוסתר).
5. הוצא את המזרק מהירך, (מכסה המזרק הכתום יתארך ויכסה את המחט)
6. מיד לאחר ההזרקה יש להגיע לרופא הקרוב ביותר

הערות:

- * המזרק האוטומטי בנוי כך שניתן להזריק איתו בעת הצורך גם דרך הבגד.
- * המזרק הינו חד פעמי. לאחר השימוש או שפג תוקפו אין להשליכו לפח אלא להביאו לבית מרקחת, לרופא או לבית חולים, כדי שהוא יועבר לאתר פסולת ייעודי.
- * יש לבדוק תקופתיות את צבע התמיסה בחלון השקוף, אין להשתמש במזרק שהתמיסה בו שינתה את צבעה או שנוצר בו משקע
- * שים לב לתאריך התפוגה המופיע על המזרק

Shamir Medical Center (Assaf Harofeh) 7033001
Affiliated to Sackler Faculty of Medicine Tel-Aviv University
**Institute of allergy immunology& pediatric
pulmonology**
+972-8-9779820 | foodallergyait@gmail.com

המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) 7033001
מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש סקלר, אוניברסיטת ת"א
מכון אלרגיה, אימונולוגיה וריאות ילדים
foodallergyait@gmail.com | 08-9779820