



הוראות שימוש במזרק אפיפן אוטומטי


מזרק אפיפן: זהו מזרק אוטומטי המכיל אדרנלין, היעיל לטיפול במקרים של תגובה אלרגית קשה שעלולה לסכן חיים.
קרא בעיון את דף ההסבר והוראות השימוש המצורפות למזרק שבמצב חירום תדעי/י איך להשתמש במזרק.

הוראות שימוש:

1. פתח את מכסה נרתיק הפלסטיק והוצא את המזרק על ידי הטיית הנרתיק.
2. אחוז את המזרק כאשר הקצה הכתום מופנה כלפי מטה, בעזרת היד השנייה משוך את מכסה הביטחון הכחול (ראה איור).



3. אחוז במזרק כאשר הקצה הכתום נמצא בסמוך לירך החיצונית תוך כדי תנופה הצמד בחוזקה את המזרק לירך החיצונית עד השמעת "קליק" כאשר המזרק בזזית 90 מעלות לירך (ראה איור).

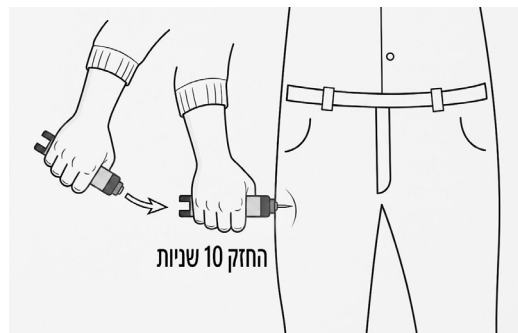

4. החזק את המזרק יציב וצמוד לירך במשך 3 שניות עד לסיום ההזרקה (כאשר ההזרקה הסתיימה, החלון השקוף במזרק יוסתר).
5. הוצא את המזרק מהירך, (מכסה המזרק הכתום יתארך ויכסה את המחט).
6. מיד לאחר ההזרקה יש להגיע לרופא הקרוב ביותר.

הערות:

- * המזרק האוטומטי בנוי כך שניתן להזריק איתו בעת הצורך גם דרך הבגד.
- * המזרק הינו חד פעמי. לאחר השימוש או שפג תוקפו אין להשליכו לפח אלא להביאו לבית מרקחת, לרופא או לבית חולים, כדי שהוא יועבר לאתר פסולת ייעודי.
- * יש לבדוק תקופתית את צבע התמיסה בחלון השקוף, אין להשתמש במזרק שהתמיסה בו שינתה את צבעה או שנוצר בו משקע.
- * שים לב לתאריך התפוגה המופיע על המזרק.